

Dezinfectare

Folosiți un dezinfectant fără clor pentru a șterge și dezinfecta acul de încălzire. Se recomandă dezinfectantul Cavicide.

Uscare

După curățare și dezinfectare, uscați. Pentru uscare se recomandă aerul comprimat.

Sterilizare

1. Piese sterilizabile: Vârfuri instrument
2. Înainte de sterilizare, folosiți o pungă de sterilizare care întrunește cerințele din reglementările naționale pentru împachetare.
3. metodă de sterilizare: sterilizare cu abur la temperatură ridicată
4. Condiții de sterilizare: 134°C pentru nu mai puțin de 5 minute.

Explicarea garanției

Ca producător, ne vom asuma responsabilitatea pentru defecțiuni ale produsului din cauza defectelor de materiale și de fabricație, numai dacă este încă în perioada de garanție de 1 an. Garanția unității principale a echipamentului este de 12 luni, pentru baterie este de 6 luni.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice deteriorare produsă de părți terțe neautorizate!

Mediu de funcționare și depozitare, Condiții de transport

Mediu de funcționare

Temperatură ambientală: +5°C - +40°C
Umiditate relativă: 20% -80%
Presiune de aer: 860 hPa - 1060hPa

Condiții la transport și depozitare

Temperatură ambientală: +5°C - +40°C

Parametri tehnici

1. Mărime mâner: Lungime: 126mm Φ:19mm
2. Tensiune de alimentare: 230V/50Hz sau 110V/60HZ
3. Putere de intrare: 5W
4. Protecție la șocuri electrice: Tip B

Reciclare și eliminare

Eliminați echipamentele uzate conform reglementărilor și standardelor din țara (regiunea) dvs. Asigurați-vă că toate componentele nu sunt contaminate la eliminare.

Simboluri



Avertisment

Atenție

Vertical în sus

Fragil

A se păstra uscat!

Echipament de clasa II (Adaptor)

Consultați manualul/broșura de instrucțiuni

Echipament tip B

A se folosi numai la interior

Curent continuu


DEEE

Produs cu marcaj CE

Umiditate relativă: ≤93%
Presiune de aer: 860 hPa - 1060hPa

Tăiere gutapercă

C-BLADE

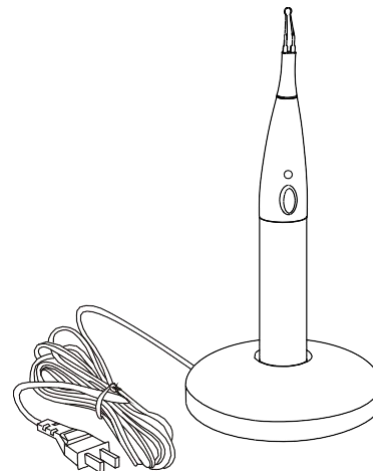

N
u
m
ă
r
d
e
s
e
r
i
e

R
e
p
r
e
z
e
n
t
a
n
t
p
e
n

tru Uniunea Europeană



Producător



Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd.

Adresă: CLĂDIREA 4, Districtul A, Guangdong, New Light Source
Baza industrială, la sud de Bulevardul Luocun, Districtul Nanhai,
Foshan, 528226 Guangdong, China

E-mail:coxotec@163.com
http://www.coxotec.com

Well KangLtd

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX,
Irlanda

5

Ver 2.1 Data revizuirii: 15-02-2020



Atenționare privind siguranța

Avertisment: Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de folosirea echipamentului. Vă va ghida pentru o utilizare corespunzătoare.

1. Citiți cu atenție manualul înainte de utilizarea echipamentului.
2. Folosiți dispozitivul conform destinației utilizării. Producătorul nu va avea nicio răspundere dacă utilizatorul nu utilizează conform instrucțiunilor sau dacă folosește dispozitivul în alte scopuri.
3. La folosirea unei surse de alimentare electrică externe, asigurați-vă că tensiunea este la interiorul intervalului de tensiune indicat pe dispozitiv pentru a evita vătămări corporale la nivelul operatorului sau pacientului.
4. Nu atingeți buzele, gingiile sau membranele mucoase cu țesuturi moi ale pacientului pentru a evita opărirea operatorului sau a pacientului. Dispozitivul trebuie folosit în afara gurii pacientului.
5. Nu atingeți acul de încălzire fierbinte cu gaze sau lichide inflamabile. Altminteri se pot produce pericole de incendiu.
6. Echipamentul nu poate fi utilizat în medii cu gaze inflamabile.
7. Nu scufundați dispozitivul în lichide.
8. Dacă echipamentul prezintă orice pierdere de lichide, sistați imediat utilizarea lui și contactați producătorul și distribuitorul autorizat pentru eliminare.
9. Trebuie folosit cu grijă la pacienți cu boli cardiace, femei însărcinate și copii.
10. Echipamentul este numai pentru uz profesional.

Configurație standard

Mâner tăietor de gutapercă	1
Bază de încărcare	1
Vârfuri instrument (4 buc.)	1

Destinația utilizării

Produsul este disponibil numai pentru medici stomatologi și personal de laborator stomatologic bine instruiți, este pentru operații chirurgicale de umplere a canalelor radiculare, folosit pentru tăierea excesului de gutapercă din canalul radicular.

Contraindicații

Este interzisă utilizarea la persoane care au implantate stimulatoare cardiace sau alte sisteme!

Instrucțiuni

Verificați dacă tensiunea sursei de alimentare electrică corespunde echipamentului înainte de încărcare.

Încărcări

1. Mai întâi, conectați încărcătorul la sursa de alimentare.
2. Puneți aparatul în baza de încărcare. Când aparatul este în fanta de încărcare, lampa-martor de pe mâner se va aprinde.

Descrierea bateriei

1. Înainte de prima utilizare a dispozitivului, asigurați-vă că este încărcat complet.
2. Nu încărcați bateria după ce este epuizată.
3. Pentru încărcarea completă a dispozitivului, timpul de încărcare trebuie să fie mai mare de 12 ore.

Operare în timpul lucrului

1. Vârful tip de stilou de pe aparat, partea curbată de la vârful este opusă butonului, ceea ce ușurează lucrul cu instrumentul.
2. Vârfurile de tip stilou trebuie instalate pe mânerul rece (și butonul nu trebuie acționat la instalare). Folosiți partea curbată de la vârf pentru tăierea gutapercii.
3. Asigurați-vă că vârful este bine instalat înainte de utilizare. Curățare: Vârful este ușor de curățat după încălzire câteva secunde.

4. După ce ați tăiat gutaperca, eliberați butonul, așteptați să se răcească vârful înainte de a-l scoate de pe pacient. Butonul de operare este „buton de contact”. Aparatul se va opri după eliberarea butonului.

Măsuri de precauție pentru siguranță

1. Nu îndoiți vârful cât timp este pe aparat.
2. Dacă forța aplicată este prea mare în timpul tratamentului, va afecta durata de viață utilă a vârfului.
3. Trebuie evitat electromagnetismul
4. Nu modificați aparatul în niciun fel.

Întreținere curentă

1. Acele trebuie curățate, dezinfectate și sterilizate înainte și după fiecare pacient.
2. Dacă acul de încălzire nu generează căldură, sistați imediat utilizarea și verificați vârful de încălzire de pe acul de încălzire să nu fie defect. Dacă are vreun defect, înlocuiți-l cu un ac nou de încălzire.
3. Dacă indicatorul de încărcare nu se aprinde în timpul încărcării, verificați dacă standul de încărcare este conectat la o sursă de alimentare electrică.
4. Acele pot fi sterilizate de 25 de ori la temperatură ridicată și autoclavă. Sterilizați de fiecare dată la 134°C pentru nu mai puțin de 5 minute.

Curățare, dezinfectare și sterilizare

Curățare

1. Folosiți un tampon de vată și îndepărtați reziduurile de gel de pe acul de încălzire.
2. Imersați într-un produs de curățare enzimatic timp de 5 minute după clătire.
3. Clătiți cu apă dedurizată după înmuiere, apoi ștergeți cu o cârpă moale care absoarbe apa pentru a elimina orice reziduuri de lichide.